



REF 3001-3002-3003-3009-3010

CE

EC

RE

MT Promed Consulting GmbH
Arenhöfstrasse 80
66366 St. Ingbert Germany

3001-3002-3003-3009-3010-IFU-Dec18-V5.0

NON STERILE

DANEX

60

WATERPROOF

WASHABLE

REFRESHING

DNK

Ugo Fix Catheter Strap Kateterstropp

Ved Optimum Medical forstår vi behovet for sikker og pålitelig fastgørelse af kateter. Vi har derfor udviklet Ugo Fix kateterstroppen for at tilbyde en behagelig støtte, som giver dig tryghed til at bevæge dig rundt.

Ugo Fix kateterstroppen gør det muligt at fastgøre indlægde urinkatetre eller slanger til urinposer til fastspænding på benet. Det er velegnet til bruk med suprapubisk kateter og urinvejskater.

Ugo Fix kateterstroppen er egnet til bruk omkring underlivet eller benet.

KODE	STØRRELSE	MÅLING
3001	Ekstra kort	op til 35cm
3002	Kort	op til 45cm
3003	Middels	op til 80cm
3009	Lang	op til 130cm
3010	Ekstra lang	op til 180cm

Fordeler ved at bruge en kateterstropp

Ugo Fix kateterstroppen reducerer træmer og smerte forårsaget af indlægde katetre, der trekker på blærehalsen og urinret. Den støtter vægten fra benposen, så den nemt fyldes og fastholder kateteret eller benposens slange i en fast position.

Ugo Fix kateterstroppen kan vaskes og genbruges. Følg vasevæjledningen fastgjort til stroppen.

Brugsanvisning

Før fastgørelse er det vigtigt, at du måler omkring dit ben og underlivet og bruger den rigtige længde.

Inden slangen fastgøres

- Placer stroppen enten omkring benet eller underlivet i den ønskede position.
- Sørg for at stroppen ikke sidder for stramt, og at Ugo Fix stroppe er placeret, så den er let tilgangeligt.

Fastgør slangen

- Loft Ugo Fix stroppen og vikl den over og under slangen, og derefter gennem øjet. Sørg for at Ugo Fix stroppen sidder i den ønskede position, og sidder godt fast om slang'en.
- Sørg for at kateteret ikke trækker når du står op, og at det er behagligt for dig at bevæge dig, når den er på plads.

ADVARSEL: Oppbevares utilgængeligt for børn!

NOR

Ugo Fix Catheter Strap Kateterstropp

Ved Optimum Medical forstår vi behovet for sikker og pålitelig kateterfiksering. Vi har utviklet Ugo Fix kateterstropp for å kunne tilby behagelig støtte, noe som gir deg selvtillit til å kunne bevege deg fritt.

Ugo Fix kateterstroppen tilbyr plasering av innbygde urinkatetre eller urinpose til fastspanding på benet. Det er velegnet til bruk med supra-pubisk kateter og urinvejskater.

Ugo Fix kateterstroppen er egnet til bruk rundt underlivet eller benet.

KODE	STØRRELSE	MÅLING
3001	Ekstra kort	opp til 35cm
3002	Kort	opp til 45cm
3003	Middels	opp til 80cm
3009	Lang	opp til 130cm
3010	Ekstra lang	opp til 180cm

Fordeler ved bruk av en kateterstropp

Ugo Fix kateterstroppen reduserer træmer og smerte forårsaget av innbygde katetre som trekker på blærehalsen og urinret. Den støtter vægten av en benpose som gjør det mulig å fylle den komfortabelt og holder kateter- eller benposeren i fast posisjon.

Ugo Fix kateterstropp er vaskbar og gjenbrukbar. Venligst følg vaseinstruksjonene som er festet til stroppen.

Instruksjoner for bruk

Før montering er det viktig at du måler rundt beinet og magen, og bruker riktig lengde.

For du sikrer slangen

- Legg stroppen rundt enten benet eller underlivet i ønsket posisjon med silikonlinjen vendt inn mot huden.
- Kontroller at stroppen ikke er for stram og Ugo Fix-stripen er plassert der den er lett tilgjengelig.

Sikring av slangen

- Loft Ugo Fix-stripen og pakk den over og under slangen, og derefter gennem øjet. Sørg for at Ugo Fix-stripen er i ønsket stilling, hold slang'en fast og fest den på plass ved hjelp av borrelsflikken.
- Sørg for at kateteret ikke trækker når du reiser deg, og at du er i stand til å bevege deg, når den er på plass.

ADVARSEL: Oppbevares utilgængeligt for børn!

FIN

Ugo Fix Catheter Strap Kateterihinna

Ved Optimum Medical -yhtiössä me ymmärrämme mikä merkitys luottavalla katetrin kiinnityksellä on. Olemme kehittäneet Ugo Fix -kateterihinnan joka antaa miellyttävän tuen jolloin sitä käytetään.

Ugo Fix -kateterihinna voidaan käyttää urinkatetrin tai jalkaan kiinnittämällä se vapaasti ja rauhallisella miellellä.

Ugo Fix -kateterihinna voidaan käyttää urinkatetrin tai jalkaan kiinnittämällä se vapaasti ja rauhallisella miellellä.

Ugo Fix -kateterihinna voidaan käyttää urinkatetrin tai jalkaan kiinnittämällä se vapaasti ja rauhallisella miellellä.

Ugo Fix -kateterihinna voidaan käyttää urinkatetrin tai jalkaan kiinnittämällä se vapaasti ja rauhallisella miellellä.

KODI	KOKO	MITTÄUS
3001	Erittäin lyhyt	jopa 35cm
3002	Lyhyt	jopa 45cm
3003	Średnia	jaka 80cm
3009	Długi	jaka 130cm
3010	Erittäin pitkä	jaka 180cm

Wszystkie rozmiary są w pełni regulowane i można je przyjąć w celu dopasowania w razie potrzeby.

Fordeler ved at bruge en kateterstropp

Ugo Fix kateterstroppen reduserer urazi og ból powodowany przez zalożenie na stałe cewniki naciągające sięj kęzherz i cewkę moczącą. Podtrzymuje ciężar worka mocowanego do nogi, umożliwiając wygodne napełnianie i utrzymanie cewnika lub rurki worka do mocowania na nodze w ustalonej pozycji.

Ugo Fix kateterstropp lze využívať a vyskúšať v rôznych dĺžkach. Vyskúšajte si rukou, či je vhodné a kvalitné.

Zalecenia dla użycia

Przed użyciem należy zdejmować obwódce okolo nogi i brzucha, aby móc skorzystać z użycia Ugo Fix.

Przed zamocowaniem rurki

- Umieść rurkę pod skórą i ujemnie ją zacznij, aby nie przesunąć rurki.
- Następnie umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.

Umożliwiająca użycie rurki

- Podnieść rurkę i umieść ją nad głową, aby móc skorzystać z użycia Ugo Fix.
- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.

Umożliwiająca użycie rurki

- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.
- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.

CZE

Ugo Fix Catheter Strap Popruh na katétru

V Optimum Medical rozmýsiemy potrzebę bezpiecznego i spolehlivého připevnění katétru. Využijeme Ugo Fix Catheter Strap pro pohodlnou podporu a svobodu s volným pohybem.

Optimum Medical -yhtiö -yhtiössä me ymmärrämme mikä merkitys luottavalla katetrin kiinnityksellä on. Olemme kehittäneet Ugo Fix -kateterihinnan joka antaa miellyttävän tuen jolloin sitä käytetään.

Ugo Fix Catheter Strap umožňuje připevnění zavedených močových katétrů nebo močových trubiček s nožními sáčky. Je vhodný pro supra-pubické nebo močové katétry.

Ugo Fix Catheter Strap je dostupný ve velikostech: 35 cm, 45 cm, 80 cm, 130 cm a 180 cm, je plně nastavitelné a v případě potřeby ho lze rozřezat. Je vhodný používání okolo dolní oblasti bricha nebo nohy.

KODI	ROZMIAR	POMIAR
3001	Erittäin krótki	maks. 35cm
3002	Krótki	maks. 45cm
3003	Middle	maks. 80cm
3009	Lang	maks. 130cm
3010	Erittäin długie	maks. 180cm

Wszystkie rozmiary są w pełni regulowane i można je przyjąć w celu dopasowania w razie potrzeby.

Wszystkie rozmiary są w pełni regulowane i można je przyjąć w celu dopasowania w razie potrzeby.

Wszystkie rozmiary są w pełni regulowane i można je przyjąć w celu dopasowania w razie potrzeby.

Wszystkie rozmiary są w pełni regulowane i można je przyjąć w celu dopasowania w razie potrzeby.

Wszystkie rozmiary są w pełni regulowane i można je przyjąć w celu dopasowania w razie potrzeby.

Wskazania do użycia

Przed użyciem należy zdejmować obwódce okolo nogi i brzucha, aby móc skorzystać z użycia Ugo Fix.

Przed zamocowaniem rurki

- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.
- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.

Wskazania do użycia

- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.
- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.

Wskazania do użycia

- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.
- Umieść rurkę pod skórą i zacznij ją zacinać.


ARE

Ugo Fix Catheter Strap Πιάντα καθετήρα

Optimum Medical -yhtiö -yhtiössä me ymmärrämme mikä merkitys luottavalla katetrin kiinnityksellä on. Olemme kehittäneet Ugo Fix -kateterihinnan joka antaa miellyttävän tuen jolloin sitä käytetään.

Ugo Fix Catheter Strap umožňuje připevnění zavedených močových katétrů nebo močových trubiček s nožními sáčky. Je vhodný pro supra-pubické nebo močové katétry.

Ugo Fix Catheter Strap je dostupný ve velikostech: 35 cm, 45 cm, 80 cm, 130 cm a 180 cm, je plně nastavitelné a v př

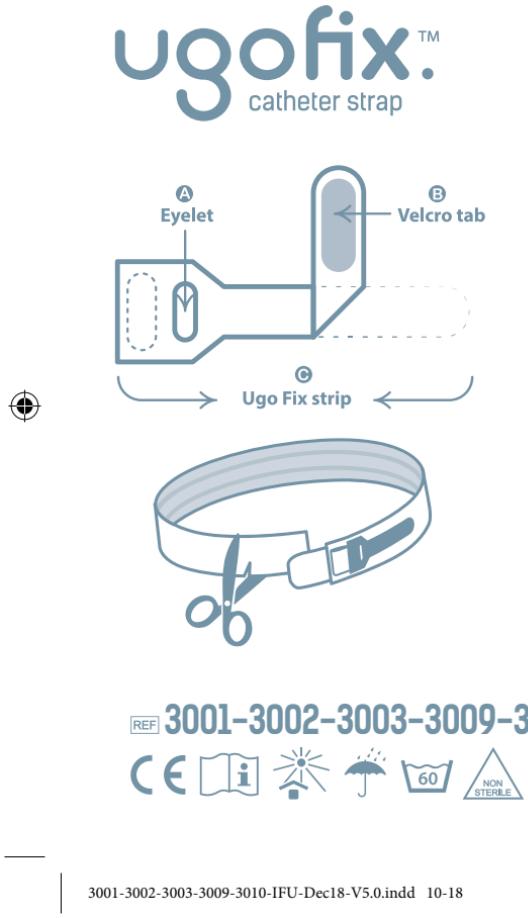

GBR

Ugo Fix Catheter Strap

At Optimum Medical we understand the need for secure and reliable catheter fixation. We have developed the Ugo Fix Catheter Strap to offer comfortable support, giving you the confidence to move around freely.

The Ugo Fix Catheter Strap allows fixation of indwelling urinary catheters or urinary leg bag tubing. It is suitable for use with supra-pubic and urethral catheters.

The Ugo Fix Catheter Strap is suitable for use around the lower abdomen or leg.

PROD. CODE	PIP CODE	NPC CODE	SIZE	MEASUREMENT
3001	393-3371	N/A	Extra short	up to 35cm
3002	393-3389	FSS 1068	Short	up to 45cm
3003	393-3397	FSS 1069	Medium	up to 80cm
3009	393-3405	FSS 1070	Long	up to 130cm
3010	393-3413	N/A	Extra long	up to 180cm

All sizes are fully adjustable and can be cut to fit if necessary.

Benefits of using a catheter strap

The Ugo Fix Catheter Strap reduces trauma and pain caused by indwelling catheters pulling on the bladder neck and urethra. It supports the weight of a leg bag allowing it to fill comfortably and retains the catheter or leg bag tubing in a fixed position.

The Ugo Fix Catheter Strap is washable and reusable. Please follow the washing instructions attached to the strap.

Instructions for use

Prior to fitting, it is important that you measure around your leg and abdomen and use the correct length.

Before securing the tubing

1. Place the strap around either the leg or lower abdomen in the desired position with the silicone line facing down on the skin.

2. Ensure the strap is not too tight and the Ugo Fix strip is positioned where easily accessible.

Securing the tubing

1. Lift the Ugo Fix strip and wrap it over and under the tubing and then through the eyelet.

Ensure the Ugo Fix strip is in the desired position and has a firm hold of the tubing, then secure in place on the strap using the velcro tab.

2. Finally ensure the catheter is not pulling when stood up and that you are able to move around comfortably with it in place.

